

Ergovision®

mieux voir le monde





La solution pour un
EXAMEN VISUEL
PERSONNALISÉ en
fonction du poste de travail !



La solution pour un examen visuel personnalisé

en fonction du poste de travail !

En vision de loin : 5 m

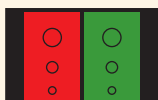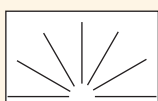	Mesure de l'acuité	←
	Dépistage de l'hypermétropie	←
	Test Duochrome	←
	Astigmatisme	←
	Phories	←

En vision de près : 33 cm

	Mesure de l'acuité	←
---	--------------------	---


→ Votre patient a-t-il une bonne vue ? Myope ? Hypermétrope ? Astigmatique ? Presbyte ?

En quelques minutes, la dernière génération ERGOVISION® offre la possibilité d'effectuer un examen visuel standard en mode automatique.

Une synthèse vocale de haute résolution pilote le test et libère le praticien d'opérations répétitives.

Des tests simples et des questions claires garantissent la participation active du patient. Le patient répondra aux questions à l'aide des boutons-réponse situés de part et d'autre de l'instrument.

Une impression rapide et silencieuse des résultats vous aidera à interpréter l'examen.

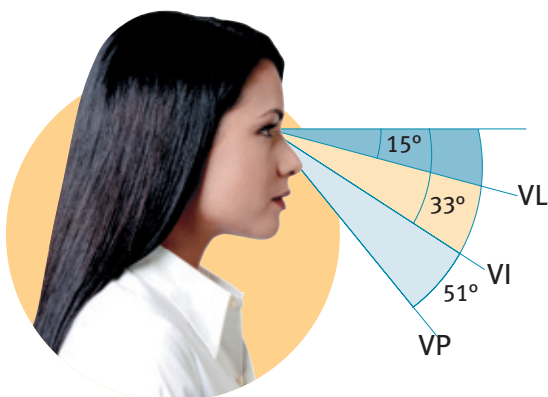

Vision Intermédiaire :

Grâce à ses 3 axes de visée, ERGOVISION® respecte le positionnement naturel de l'œil.

VL = Vision de Loin

VI = Vision Intermédiaire

VP = Vision de Près



Vision des **contrastes**


Vision **crépusculaire**

Temps de **récupération** à l'éblouissement

Vision de loin **binoculaire**

Vision des **reliefs**

Champ visuel **périphérique**

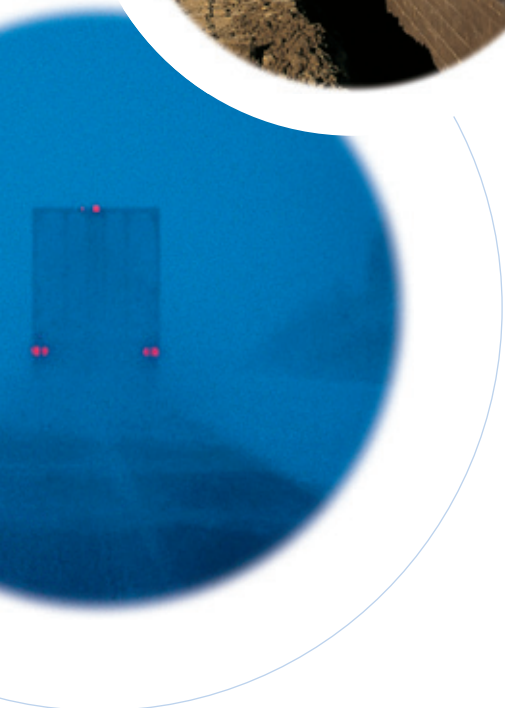

Personnaliser un examen visuel,
reconnu scientifiquement,
grâce à **ERGOVISION®** !

→ Les fonctions visuelles
du sujet garantissent-elles
sa sécurité, son confort
et son efficacité
au poste de travail ?

Les 13 tests additionnels
proposés en examen
complémentaire vous
permettront d'effectuer un
examen personnalisé et de mettre
votre patient en situation de travail.

Ainsi, dans le respect de la réglementation en vigueur et
en fonction des symptômes décrits par le sujet, vous serez
en mesure d'apprécier la bonne adéquation entre la vue du
patient et les sollicitations auxquelles il est soumis à l'exécution
de son travail.

Vision **intermédiaire**

Hétérophorie en vision intermédiaire

Fusion

Fatigue visuelle

Vision **cinétique**





CARACTERISTIQUES FONCTIONNELLES

Mode opératoire utilisateur :	Manuel ou automatique
Mode automatique :	Instructions par synthèse vocale 16 kHz Synthèse vocale multilingues 6 tests (examen visuel standard)
Mode manuel :	13 tests additionnels (Tests spécifiques au poste de travail)
Télécommande :	Fonctionnement RF ou filaire
Fonctions annexes :	Menu configurable Menu d'auto-contrôle Menu d'auto-maintenance
Impression des résultats :	Imprimante intégrée 10 lignes / seconde Impression des résultats du test automatique
Hauteur réglable	
Prise casque audio :	Disponible sur toutes versions
Prise de transfert informatique :	RS232

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Distance de présentation :	Vision de Loin : 5 m Vision Intermédiaire : 66 cm Vision de Près : 33 cm
Luminance des tests :	Proche de 300 cd/m²
Contraste des optotypes :	Proche de 1
Dimensions :	370 x 400 x 450 mm
Poids :	13 kg
Télécommande :	Batterie : accumulateur
Tension d'alimentation :	115-230 V / 50-60 Hz
Consommation électrique :	220 W
Conforme au marquage CE .	

ACCESSOIRE

Sac de transport *

(*) Option

Dans un souci d'amélioration, ces spécifications ne sont pas contractuelles et sont sujettes à modification sans préavis.



Direction de la Santé Visuelle
Essilor Dépistage - 64 bis avenue Aubert - 94306 Vincennes cedex
Tél. : 01 72 70 77 77 - Fax : 01 72 70 77 78